

Küschall®
THE KSL®



UNLIMIT YOUR WORLD

Wir bei Kuschall sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, es zu erreichen, stark genug ist. Der KSL® von Kuschall bietet in einem einzigen Produkt Modularität und Performance zugleich. Lass deinen Kräften freien Lauf - **befreie deine Welt von Grenzen.**

THE KSL®

Eleganz ist das Markenzeichen des KSL. Geh aufs Ganze mit Kuschall und erlebe eine unvergleichliche Qualität kombiniert mit minimalistischem Design. Der nach Maß angefertigte KSL ist für erfahrene Nutzer konzipiert. Er lässt sich vollständig an individuelle Bedürfnisse anpassen und gibt dir die Freiheit, deinen Lebensstil täglich umzusetzen.

HYDROFORMING

Der ultraleichte KSL ist mit seinem vollverschweißten Rahmen ein Inbegriff für Schönheit, Design und Stil. Mit dem speziell im Hydroforming-Verfahren hergestellten, starren Rahmen macht dieser Rollstuhl einen Quantensprung unter den Aktiv-Rollstühlen: nochmals verbesserte Steifigkeit, nochmals weniger Gewicht und eine einzigartig charakteristische, zukunftsweisende Form. Auch der neue KSL wird seinem Ruf mehr als gerecht: formvollendetes Design mit höchstem Leistungsanspruch.

HYDROGEFORMTER VORDERRAHMEN

■ Das Highlight am neuen KSL: der komplett neu konstruierte Vorderrahmen! Du erkennst ihn an seiner charakteristischen, kantigen Form, die erst durch den Einsatz des Hydroforming-Verfahrens möglich wurde. Die Kante ist ergonomisch perfekt zum Abstützen und Umsetzen.

LEICHTE AKTIV- BREMSE

■ Noch minimalistischer, noch leichter, noch griffiger: Die neue Aktiv-Bremse ist wie gemacht für den KSL. Sie wurde gewichtsoptimiert und lässt sich höchst präzise regulieren - bei jeder Geschwindigkeit.

HINTERRADACHSE AUS CARBON

■ Die Achse aus Carbon verleiht zusätzliche Festigkeit bei geringem Gewicht und trägt somit zur unschlagbaren Fahrperformance bei.

FUSSBÜGEL AUS TITAN

■ Beim KSL kommen nur die stabilsten und leichtesten Materialien zum Einsatz. Der elegante Fußbügel ist aus robustem und edlem Titan gefertigt.



Küschall®

THE KSL®

VOLLVERSCHWEISSTER RAHMEN

- Der Rahmen des KSL bildet eine komplette, vollverschweißte Einheit. Diese verleiht dem Rollstuhl sein einzigartiges, reduziertes Design. Auch im Gewicht macht sich das bemerkbar: Der KSL bringt im Transportgewicht ohne Räder nur 4,3 kg auf die Waage. Das ist der leichteste Küschall Rollstuhl, den wir je gebaut haben.

CARBOLIFE GREIFREIFEN

- Dieser Greifreifen ist extra ergonomisch design, sodass er einen festen, effizienten Griff bietet. Das Handgelenk wird dabei entlastet. Auch dieses Produktmerkmal trägt dazu bei, dass du die hohe Leistungsfähigkeit des KSL voll ausnutzen kannst und dabei weniger schnell ermüdest. Carbolife Greifreifen sind als optionale Ausstattung verfügbar.


NEUE VORDERRADGABELN

- Das neue und klare Design mit integrierten Lagern ist deutlich weniger anfällig für Schmutz und wartungsfreundlicher.

HAUPTMERK- MALE

ANFERTI- GUNG AUF MASS

Die einzigartige Konstruktion des Rahmens machen den KSL super leicht. Die Rahmengeometrie fließt nahtlos in das Profil des Stuhls ein. Der KSL ist aus einem Guss und strahlt dies in seiner reduzierten, modernen Designsprache von vorne bis hinten aus.

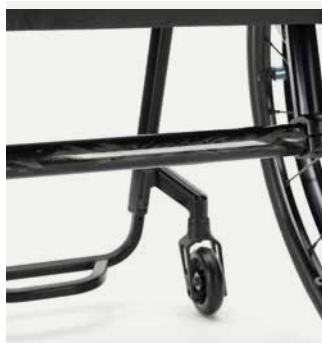

SUPER LEICHT

Der KSL vereint das Optimum an Leistungsstärke und Festigkeit, sodass aktive und sportliche Fahrer voll auf ihre Kosten kommen. Carbon-Teile ergänzen das Konzept ideal und tragen neben ihrer Steifigkeit auch zum geringen Gewicht bei.

ELEGANT

Auf die Details kommt es an! So haben wir dem KSL eine komplett neu entwickelten Fußbügel verliehen. Er ist essentiell für die Positionierung der Beine und ergänzt in seiner Optik den dynamischen Look des Kuschall KSL.



HYDRO- FORMING

Die Hydroforming-Technologie ermöglicht es, Aluminium in neue, äußerst robuste Formen zu bringen. Dank dieses Verfahrens konnten wir den vorderen Rahmenrohren eine markante Kante verpassen, die nicht nur das Charakteristikum der neuen Kuschall-Serie ist, sondern auch noch ideal zum Abstützen.

DEIN KSL - DEIN STYLE!

1 WÄHLE DEINE RAHMENFARBE



Verkehrsweiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Verkehrsblau



Karminrot

*weitere Rahmenfarben optional erhältlich

2 WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



3 WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot



Schwarz



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE

340 – 440 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE

385 – 485 mm
in 25 mm Schritten



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

350 – 500 mm
in 10 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- HÖHE

270 – 420 mm
in 15 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- WINKEL

74° / 78° / 82° /
86° / 90°



SITZHÖHE

vorn: 450 – 530 mm
hinten: 400 – 480 mm
in 10 mm Schritten



RAHMENWINKEL

75° / 90°



GESAMTBREITE

SB + 170 mm



GESAMTLÄNGE

75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm



SCHWERPUNKT

5 Positionen



RADSTURZ

0° / 3° / 6°



GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 6.8 kg



TRANSPORT- GEWICHT

4.3 kg



MAX. NUTZERGEWICHT

100 kg



Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.

K

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Küschall, Küschall Unlimit your world und THE KSL® sind Marken von Invacare International GmbH. Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der laufenden Optimierung des Produkts behält sich Invacare International GmbH das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern.

© Mai 2020, Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DE - 1647611