

Küschall



Küschall

Invacare GmbH | Am Achener Hof 8 | D-88316 Isny | Deutschland
Telefon +49 (0) 07562 / 700 - 38 | www.invacare.de

SCHWEIZ:

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

ÖSTERREICH:

Invacare Austria GmbH | Herzog-Odilo-Straße 101 | AT -5310 Mondsee | Österreich
Telefon +43 (0) 6232 55350 | Fax +43 (0) 6232 55354 | www.invacare-austria.at







UNLIMIT YOUR WORLD

Wir bei Kuschall streben täglich danach, dir die ideale Lösung zu bieten, damit du dein Leben ganz nach deinen Vorstellungen führen kannst. Lass deiner Abenteuerlust freien Lauf! Wir möchten dich dabei unterstützen.

Wir sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, es zu erreichen, stark genug ist.
Wir wünschen uns, dass du ein aktives Leben führst und auch in schwierigen Zeiten nicht den Mut verlierst, sondern Vertrauen hast in einen Rollstuhl, mit dem du dich sicher fühlst.

Unser Ziel ist es, dir die besten Produkte zu bieten, damit du deine Welt von Grenzen befreien kannst.

HY DR OF FOR MI NG

Hydroforming - die Zauberformel für deinen leistungsstarken Kuschall Rollstuhl

Hier geht es um die Technik, die in den neuen Kuschall-Rollstühlen steckt und sie noch aktiver und leistungsstärker als bisher macht.

Hydroforming ist ein Verfahren, mit dem sich Metalle in leichtgewichtige, strukturell steife und stabile Teile formen lassen. Es wird beispielsweise auch bei leistungsstarken Fahrrädern oder in der Automobilindustrie eingesetzt. Mithilfe dieses Hochdruckverfahrens wird das Rahmenrohr unserer Rollstühle vor dem Druckaufbau vollständig in eine Gussform gebettet, wodurch neue Möglichkeiten für komplexe Formen entstehen, die stärker, leichter und steifer sind.

Die Hydroforming-Technologie macht Kuschall-Rahmen nochmals stabiler und sie lassen sich besonders leicht antreiben.

Auch während der Fahrt machen sich die Vorteile des hydrogeformten Rahmens bemerkbar: Er minimiert die Vibrationen, sodass das Fahren noch angenehmer wird.

Kurz gesagt, mit einem Aktiv-Rollstuhl der neuen Kuschall Serie hast du bestes Material auf dem neuesten Stand der Technik. Und vom Ergebnis wirst du begeistert sein: super agil, super leicht.



K

KÜS

PORT



FOLIO

THE KSL®

| STARR



THE KSL® - der Aktivrollstuhl, der höchste Maßstäbe setzt. Keiner ist eleganter, keiner präziser, keiner mehr durchdesignt. THE KSL® wird immer nach Maß exakt auf dich angefertigt und geht mit dir durch dick und dünn. Er lässt sich vollständig an individuelle Bedürfnisse anpassen und gibt dir die Freiheit, deinen Stil zu leben. Dieser Lifestyle-Rollstuhl ist ultraleicht und läuft fast wie von selbst. Sein Charakter-Rahmen verleiht ihm das gewisse Etwas, das ihn von allen anderen abhebt.

- **Einmalig elegant und minimalistisches Design**
- **Nach Maß gefertigt**
- **Ultraleicht**








1



2



3

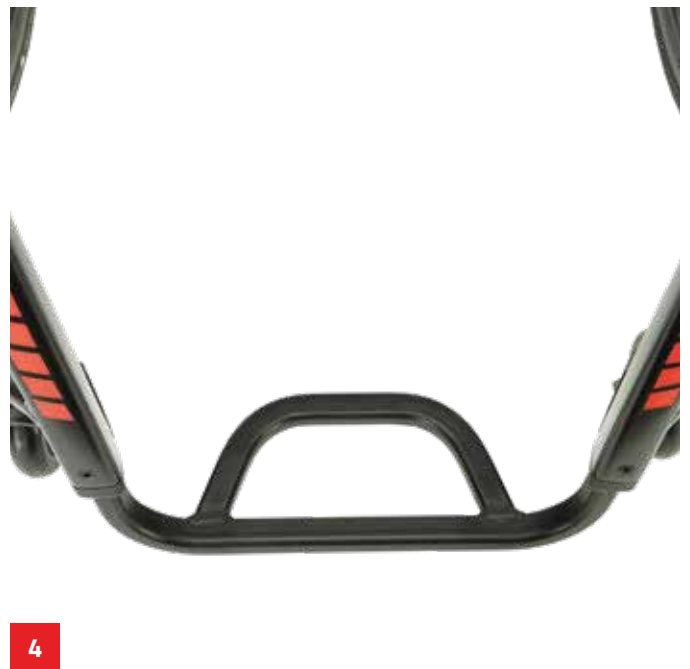

4

K

1. An dir und deinen Bedürfnissen gemessen und danach entwickelt.

Alles, was nach Maß gefertigt wird, erfordert hohe Qualitäts- und Präzisionsstandards. THE KSL® erfüllt sie alle und weist zusätzlich eine leistungsstarke Geometrie auf, die geschmeidig in die Silhouette des Rollstuhls übergeht.

2. Integriertes Design

Vom Vorderrahmen über die Rückenstrebe bis hin zur Vorderradaufnahme sprechen alle Bestandteile des neuen THE KSL® die gleiche Designsprache. Seine stabile und klare Bauweise vereinen Tradition und Modernität.

3. Feste oder abklappbare Rückenlehne

Geh keine Kompromisse ein! THE KSL® ist für höchste Steifigkeit und Stabilität konzipiert. Dennoch bietet er dir die freie Wahl zwischen einer festen oder abklappbaren Rückenlehne. Der perfekte Rollstuhl für alle, die aktiv sein wollen: mit der abklappbaren Ausführung eignet er sich ideal zum Transportieren und lässt sich platzsparend verstauen.

4. Neu entworfene Fußauflage

Der Unterschied liegt immer im Detail. Der neue Fußbügel verleiht deinen Füßen einen sicheren Stand und verhindert unangenehme Druckstellen. Die Oberfläche ist abgeflacht und damit noch bequemer. Dies ist sehr wichtig, denn die Fußauflage ist ein fundamentales Element deiner Sitzposition. Außerdem komplettiert sie das gesamte Erscheinungsbild perfekt.



Die stylische, modulare K-Series ist das perfekte Produkt für dich, wenn du nach einem designstarken Rollstuhl mit herausragender Leistung suchst. Das einzigartige, bewegliche Sitzmodul kann bequem und unabhängig vom Rahmen verstellt werden und ist vollständig und perfekt an deine Bedürfnisse anpassbar. Egal, ob du eine sehr stabile, passive oder eine eher aktive Sitzposition brauchst – die K-Series lässt sich ganz an deinen Lebensstil anpassen. Der dynamische Aktiv-Rollstuhl zeigt außerdem eine herausragende Fahrleistung, die jedem Tempo gewachsen ist.

- **Stylisch**
- **Modular**
- **Dynamisch**







1



2



3



4

K

1. Zeitlose Innovation

Dieser Rollstuhl ist das Herzstück von Kuschall und vereint die Philosophie dieser Marke: In der K-Series steckt das komplette Kuschall Know-how, sodass keine Wünsche offen bleiben. Das Modell vereint Vielseitigkeit, Leistung und Design. Wenn es ein Produkt gibt, das all unsere Überzeugungen verkörpert, dann ist es die K-Series.

2. Anpassbares Sitzmodul

Das Sitzmodul ist unabhängig vom Rahmen einstellbar und ermöglicht es dir, deine Sitzposition mühelos an Deine Bedürfnisse anzupassen. Der Schwerpunkt und die Sitzhöhe lassen sich ebenfalls ganz nach Deinen Wünschen anpassen.

3. Ergonomische Rückenstrebe

Die neue, ergonomisch entworfene und hydrogeformte Rückenstrebe verhilft zu einem besseren Griff und erleichtert das Anheben. Ein clever konzipierter Rollstuhl, der sich an die wechselnden Umstände deines Alltags anpasst.

4. Abklappbare Rückenlehne

Der Rücken lässt sich mit sechs verschiedenen Winklereinstellungen nach Belieben positionieren. Für den Transport kannst du die Lehne auf das Sitzmodul abklappen. Ein Lifestylerollstuhl, mit dem du immer auf Achse bist!

CHAMPION


| FALTBAR



Dieser hybride Aktiv-Rollstuhl ist einerseits zusammenfaltbar, gleichzeitig verfügt er über die Fahreigenschaften eines Starrrahmen-Rollstuhls. So ist der Champion für einen Faltrollstuhl besonders starr und lauffreudig. Und weil er sich so praktisch und kompakt klein zusammenfalten lässt, ist er auch der ideale Reisebegleiter. Mit der SK-Option (Swiss Knife) lässt er sich wie ein Schweizer Taschenmesser so klein zusammenfalten, dass er ins Handgepäck passt - ohne Räder natürlich. Leicht, starr, modern design - der perfekte Begleiter für ein bewegtes Leben.

- **Einzigartig**
- **Hybrid**
- **Hochkompakt**



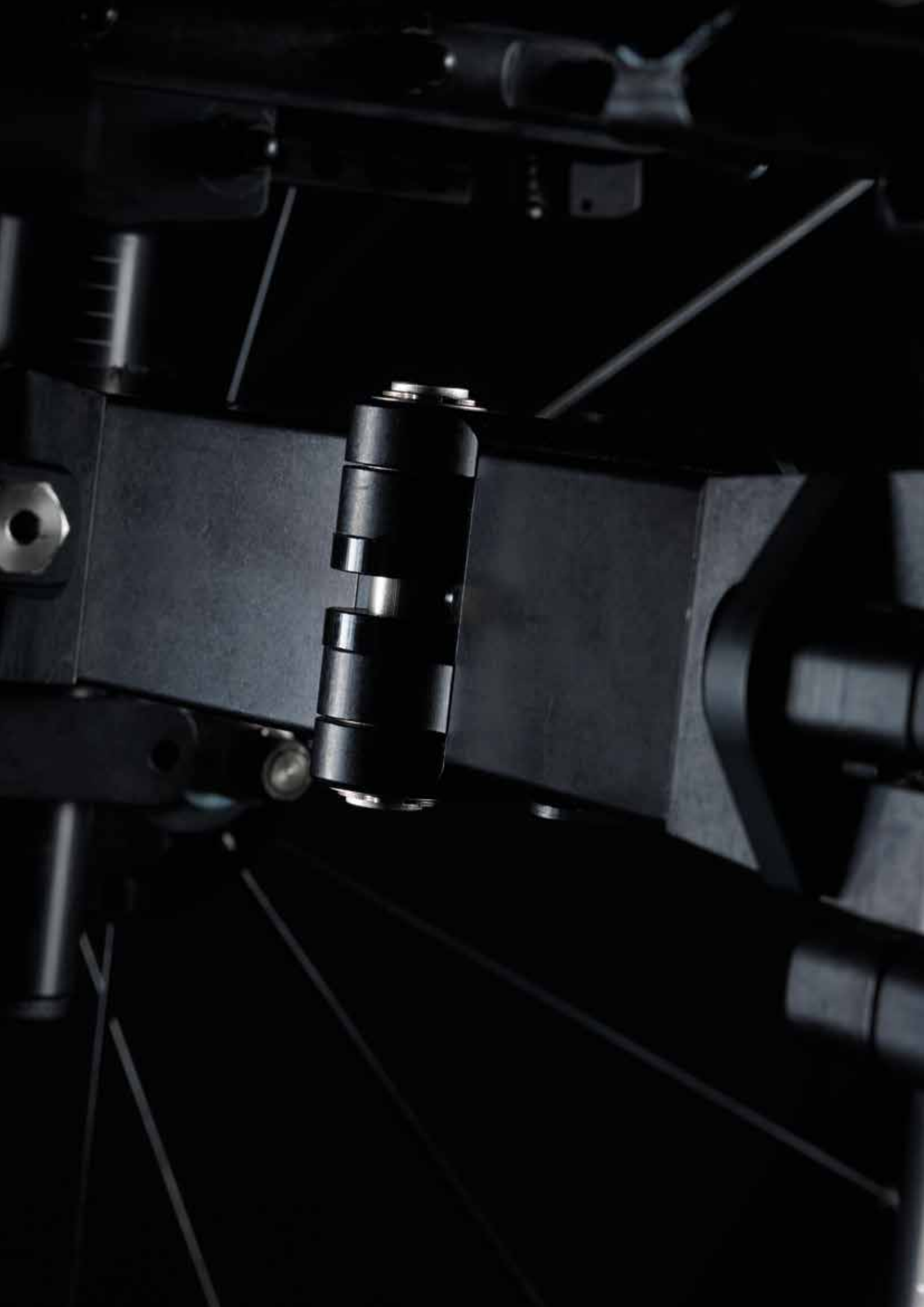




1



2



3

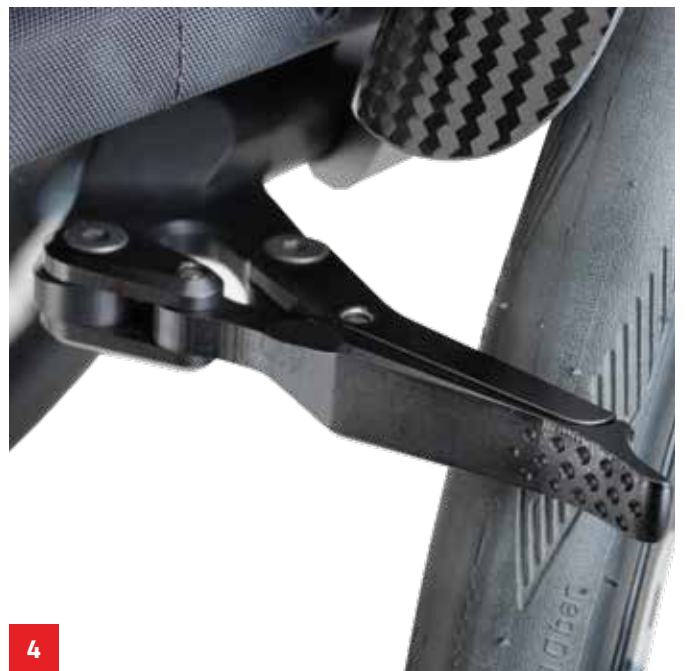

4



1. **Einzigartiger horizontaler Faltmechanismus**

Der Rahmen des Kuschall Champion ist einzigartig, denn es gibt keinen vergleichbaren Rollstuhl. Er ist einfach und schnell zusammenfaltbar und dennoch besonders starr mit sehr guten Laufeigenschaften. Außerdem lässt er sich so einstellen, dass er genau zu dir passt. Deinen idealen Schwerpunkt kannst du durch neun verschiedene Hinterradpositionen exakt einstellen. Die Feinjustierung des Schwerpunkts und die Anpassung der hinteren Sitzhöhe erfolgen über die hintere Adapterplatte.

2. **Schlanke Fußauflage für optimierten Halt**

Die neue Fußauflage fügt sich nahtlos in das neue Design des Champion ein. Die geradlinigen Konturen ergänzen zudem die Geometrie des gesamten Rollstuhls. Die Antirutsch-Oberfläche bietet einen perfekten Halt und fördert eine gute Positionierung im Kuschall Champion.

3. **Der SK-Rahmen**

Wenn du vom Reisen träumst, macht der Champion mit Swiss Knife Option diesen Traum für dich wahr. In dieser Version besitzt dein Rollstuhl einen faltbaren Vorderrahmen, der sich wie ein Schweizer Taschenmesser auf ein noch kleineres Packmaß zusammenfalten lässt. Ohne Räder ist der Rahmen dann fast nur so hoch wie ein DIN A4 Ordner. Dank seinem minimalistischen Packmaß wird der Champion zum perfekten Reisebegleiter für deine Abenteuer.

4. **Neue Bremse**

Du kannst deinen Rollstuhl optional mit der Aktiv-Bremse ausstatten, die neu konzipiert wurde und im Vergleich zu anderen Bremsen um fast ein Drittel leichter ist. Mit der Aktiv-Bremse sparst du nicht nur Gewicht ein, sondern hast deinen Kuschall Champion optimal im Griff: Die Bremse aus Aluminium ist besonders präzise und greift zuverlässig in jeder Situation. So bist du stylisch und sicher unterwegs.

COMPACT

| FALTBAR






Zuverlässigkeit, erstklassige Qualität und herausragende Funktionalität: Dafür steht der Kuschall Compact mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Alltag und beim aktiven Fahren. Er lässt sich bequem an deine Bedürfnisse und deinen Lebensstil anpassen – du kannst ihn nach Lust und Laune konfigurieren. Er ist entweder mit wegschwenkbaren Beinstützen oder festem Vorderrahmen erhältlich und lässt sich ganz leicht zusammenfallen.

- **Zuverlässig**
- **Hohe Funktionalität**
- **Für noch mehr Komfort**





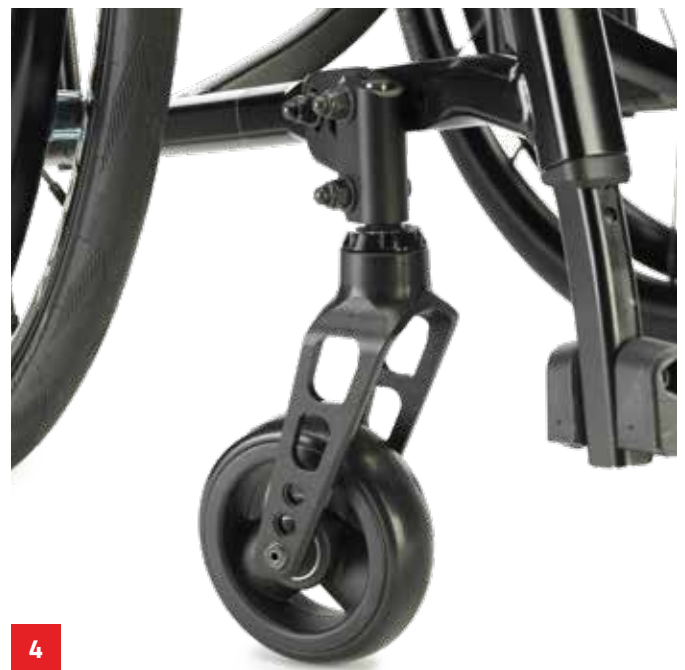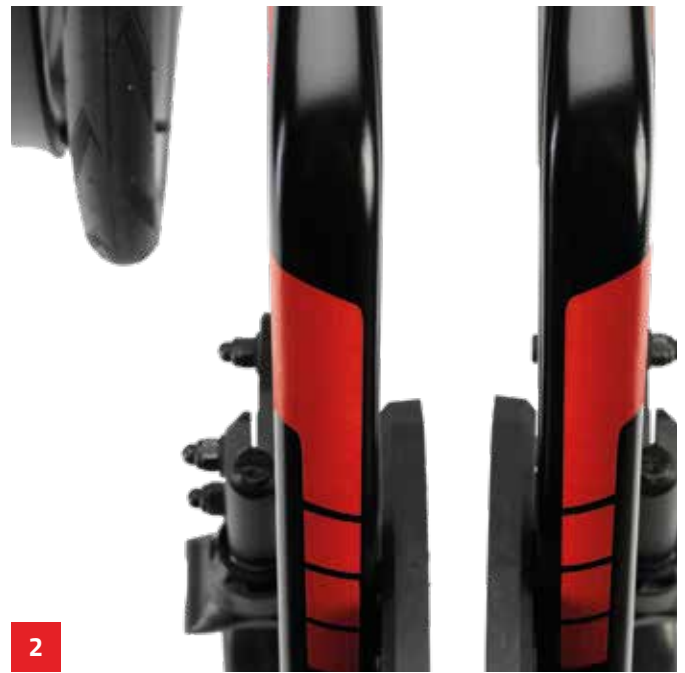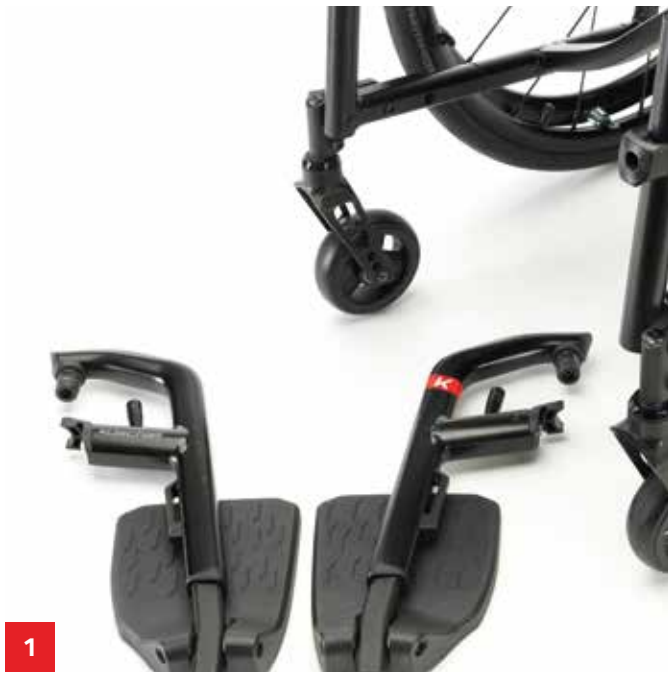

1. Ein Vorderrahmen deiner Wahl: fest oder abschwenkbar

Unsere Ingenieure haben Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit in einem Produkt vereint. Beim neuen Kuschall Compact kannst du zwischen einem festen Vorderrahmen und seitlich abschwenkbaren Beinstützen wählen. Der feste Vorderrahmen steigert die Steifigkeit und ist in einem Winkel von 70° oder 80° verfügbar. Die abschwenkbaren und abnehmbaren Beinstützen sind ideal, wenn du ihn oft transportieren oder Transfers durchführen möchtest.

2. Kleinere Rahmenrohrdurchmesser

Mehr Steifigkeit bei schlankeren Röhren: Das Hydroforming-Verfahren ermöglicht eine deutliche Gewichtsreduzierung des Rahmens. Weniger Gewicht bedeutet immer, dass sich der Rollstuhl leichter antreiben, transportieren und verstauen lässt. Design und Funktionalität sind beim Kuschall Compact so intelligent kombiniert, dass insgesamt ein leichter, leistungsstarker Rollstuhl entstanden ist.

3. Zeigt Kante: der neue Vorderrahmen

Das Highlight der neuen Kuschall-Serie: der komplett neu konstruierte Vorderrahmen! Du erkennst ihn an seiner charakteristischen, kantigen Form, die erst durch Einsatz des Hydroforming-Verfahrens möglich wurde. Die neue Kante sieht nicht nur stylisch aus, sondern ist auch sehr praktisch beim Durchführen von Transfers.

4. Die Spur halten mit „Keep on Track“

Die intuitiven Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln ermöglichen eine optimale Ausrichtung der Vorderräder – damit du die Spur immer exakt halten kannst.

BENUTZER

Gestalte deinen Rollstuhl nach deinem Geschmack: Teste unseren Konfigurator, mit dem du deinen Kuschall individuell gestalten und rundherum aus 360° betrachten kannst. Den Konfigurator findest du auf: www.kuschall.com



Gestalte deinen Rollstuhl in 3 Schritten ganz individuell:

Scannen und 3D-Konfigurator starten

1 WÄHLE DEINE RAHMENFARBE



Verkehrsweiß

Anthrazitgrau

Tiefschwarz

Karminrot

Verkehrsblau

* weitere Rahmenfarben optional erhältlich

2 WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



Kuschall Markenlogo



Kuschall Design-Element

3 WÄHLE DEINE LOGOFARBE



Rot

Schwarz



Hellgrau

Gold

Rot

Blau

Dunkelgrau


Schwarz

ANPASSUNG

Was ist dein Lifestyle?

Du tummelst dich am liebsten in belebten Einkaufszentren und tanzt abends in deinem Lieblingsclub? Oder packt dich regelmäßig das Reisefieber und du brauchst einen Rollstuhl, der sich auf Handgepäckgröße zusammenfalten lässt? Vielleicht ist vor dir auch keine Halfpipe sicher und kompromisslose Kraftübertragung für dich ein Muss? Teste doch einfach mal in unserem Kuschall Konfigurator, welches Modell am besten zu dir passt! Dabei kannst du Farben und Zubehör nach Lust und Laune kombinieren und dein Meisterwerk in der 360°- Ansicht bewundern.

KÜSCHALL ONLINE-KONFIGURATOR

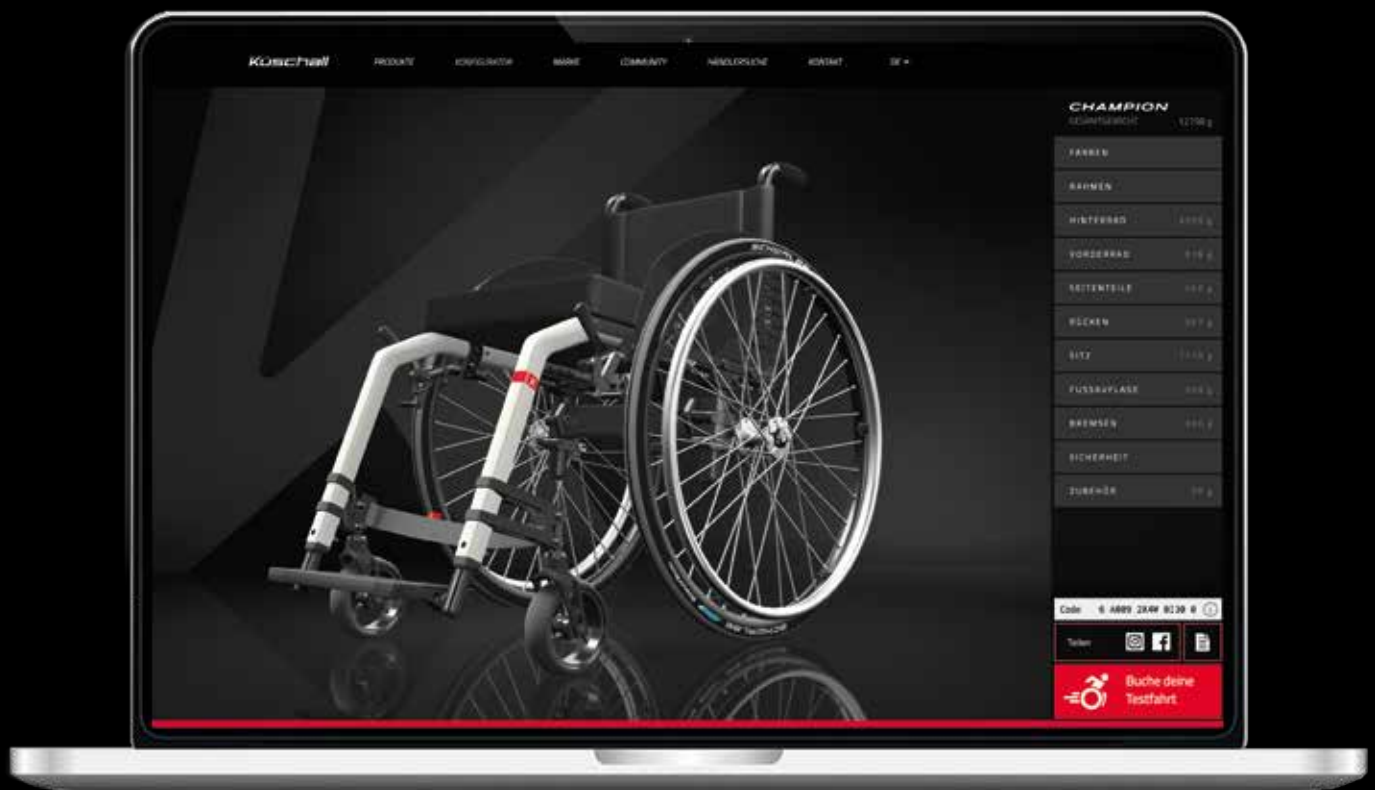

SEI INDIVIDUELL


Entdecke die endlosen Möglichkeiten unter www.kuschall.com.

ZU BE HÖR

Personalisiere deinen Rollstuhl bis ins kleinste Detail.

Rüste ihn mit dem Zubehör aus, das dir zu neuen Höhenflügen verhilft.

Entdecke das ganze Sortiment an Zubehörteilen für deinen Rollstuhl auf kuschall.com.

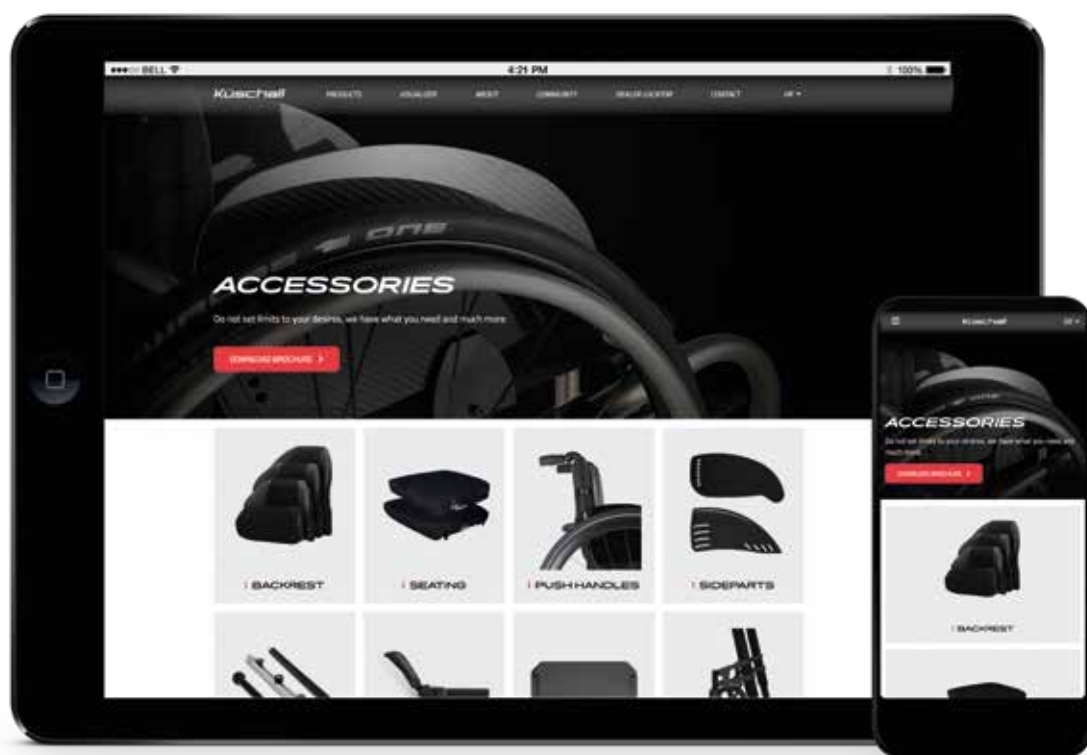



TECHNISCHE DATEN

STARR

	<i>THE KSL®</i>	<i>K-SERIES</i>
▪ Rahmenwinkel	75° / 90°	75° / 90°
▪ Sitzbreite	340 - 440 mm	320 - 500 mm
▪ Sitztiefe	385 - 485 mm	350 - 525 mm
▪ Gesamtbreite	SB + 170 mm	ca. 490 - 805 mm
▪ Gesamtlänge	75°: ca. 800 mm 90°: ca. 730 mm	75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm
▪ Gesamtgewicht, leer	ca. 6.8 kg	ca. 7.9 kg
▪ Transportgewicht	ca. 4.3 kg	ca. 5.3 kg
▪ Max. Nutzergewicht	100 kg	130 kg
▪ HMV-Nummer	-	18.50.03.5011

FALTBAR

	<i>CHAMPION</i>	<i>COMPACT</i>
▪ Rahmenwinkel	75° / 90° Standard- oder Adduktionsrahmen	70° / 80° Standard- oder Adduktionsrahmen
▪ Sitzbreite	360 - 480 mm	280 - 500 mm
▪ Sitztiefe	340 - 480 mm	320 - 500 mm
▪ Gesamtbreite	SB + 160 - 240 mm	SB + 180 mm
▪ Gesamtlänge	75°: ca. 930 mm 90°: ca. 830 mm	70°: ca. 870 - 1220 mm 80°: ca. 850 - 1200 mm
▪ Gesamtgewicht, leer	ca. 9.2 kg	ca. 10.5 kg (wegschwenkbare Beinstützen) ca. 9.6 kg (fester Vorderrahmen)
▪ Transportgewicht	ca. 6.7 kg	ca. 7.8 kg (wegschwenkbare Beinstützen) ca. 6.7 kg (fester Vorderrahmen)
▪ Max. Nutzergewicht	120 kg	130 kg
▪ HMV-Nummer	18.50.03.0251	18.50.03.0252

Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.

Entdecke alles unter [kuschall.com](https://www.kuschall.com).



Küschall ist ein registrierter Markenname.
Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Publikation zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der fortlaufenden Verbesserungen der Produkte behält sich die Küschall AG das Recht vor, jederzeit Änderungen an den dargestellten Modellen vorzunehmen.

Jegliche Verwendung dieser Publikation, ganz oder auszugsweise, sowie die Vervielfältigung von Abbildungen sind ohne schriftliche Zustimmung der Küschall AG untersagt.

2023 Copyright © 07/2023, Küschall AG, Schweiz.
Alle Rechte vorbehalten. Art. Nr. 1436316

K

/ UNLIMIT YOUR WORLD